

Untersuchungsauftrag Chimaerismus-Analytik



<p><u>Patient*innen-Etikett</u></p> <p>Name, Vorname: _____</p> <p>Geb.-Dat.: _____</p> <p>Adresse (bei Privatpatient*innen): _____</p> <p><input type="checkbox"/> stationär (nicht teilstationär) <input type="checkbox"/> ambulant</p>	<p><u>Kostenträger</u></p> <p><input type="checkbox"/> Privat (stationär: Chefarztbehandlung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein)</p> <p><input type="checkbox"/> Kasse:</p> <p><input type="checkbox"/> § 116b:</p> <p><input type="checkbox"/> andere Versicherungsformen (z.B. Berufsgenossenschaft, Postbeamtenkrankenkasse): _____</p>
<p><u>Diagnose</u></p> <p> <input type="checkbox"/> AML <input type="checkbox"/> ALL <input type="checkbox"/> MDS <input type="checkbox"/> CML <input type="checkbox"/> CMPE <input type="checkbox"/> Multiples Myelom <input type="checkbox"/> CLL <input type="checkbox"/> NHL </p> <p><u>Bemerkungen:</u> <input type="checkbox"/> sonstige: _____</p>	
<p><u>Probenstatus</u></p> <p> <input type="checkbox"/> Verlaufskontrolle <input type="checkbox"/> Spenderprobe <input type="checkbox"/> Empfängerprobe (vor allogener Transplantation) </p> <p style="text-align: center;">Spender-Nr.: _____</p> <p>Tag der Transplantation: _____ TT/MM/JJJJ</p>	
<p><u>Untersuchungsmaterial*</u> Leukozytenzahl: _____ Entnahmedatum: _____ TT/MM/JJJJ</p> <p> <input type="checkbox"/> Peripheres Blut <input type="checkbox"/> Knochenmark <input type="checkbox"/> Stammzellasservat </p> <p><input type="checkbox"/> sonstiges: _____</p>	
<p><u>gewünschte Untersuchungen</u> <input type="checkbox"/> Gesamt-Chimaerismus¹ Chimaerismus aus Subpopulationen²:</p> <p><u>Bemerkungen:</u> <input type="checkbox"/> T-Zellen <input type="checkbox"/> Granulozyten <input type="checkbox"/> B-Zellen </p> <hr style="font-size: small; color: gray;"/> <p><small>1 Diese Analyse wird bis Tag +99 nach SZT STR-basiert mittels Multiplex PCR (akkreditiert), ab Tag +100 nach SZT mittels NGS (Chimaerascope™) (nicht akkreditiert) durchgeführt.</small></p> <p><small>2 Bitte beachten Sie die empfohlenen Versandzeiten. Die Chimaerismus-Analyse von weiteren Zellpopulationen kann ggf. nach Rücksprache durchgeführt werden.</small></p>	
<p><u>Einsender (Arzt-, Klinikstempel)</u></p> <p>Unterschrift: _____</p>	<p><u>Versandadresse:</u></p> <p>AgenDix GmbH, z. Hd. Prof. Dr. Christian Thiede Fiedlerstr. 36 01307 Dresden</p>

Wichtige Hinweise für die Abnahme von Probenmaterial

Stellen Sie bitte **vor** der Probenentnahme, insbesondere bei der Abnahme von Patientenmaterial vor der Transplantation sowie Spendermaterial, die Identität der Person sicher. Zudem ist eine sorgfältige Beschriftung des Probenmaterials und des Probenanforderungsscheins zur Patientenidentifikation eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der Chimaerismusanalyse.

Probenmaterial:

Hinweise zu geeigneten Probenmaterialien, deren Gewinnung und Mengenangaben sowie das maximale Intervall zwischen Probenentnahme und Probeneingang (Spezifikation) sind dem auf der Homepage verfügbaren Primärprobenhandbuch zu entnehmen.

Bitte nutzen Sie Blutröhrchen mit geeignetem Antikoagulant (Lithium-Heparin, EDTA, Spritze mit 0.5 ml Li-Heparin durchspülen und sofort verwenden): die Röhrchen bis zur Markierung füllen und nach Blutentnahme mehrmals über Kopf schwenken.

Fingernagel (als Material vor der Transplantation):

Geben Sie mindestens 2-5 Fingernagelabschnitte in ein geeignetes Transportgefäß, (z.B. 1,5 ml Reaktionsgefäß), welches mit den Patientendaten beschriftet ist.

Wangenschleimhautabstrich (als Material vor der Transplantation):


Die Patienten sollten **unmittelbar** vor der Entnahme der Proben nichts Essen oder Trinken. Wichtig ist, dass **keine** Speisereste dem Abstrich anhaften. Den Mundraum bitte 2-3 Mal mit Wasser spülen. Als Abstrichstäbchen eignen sich Nylonfaserbürsten.



1. Beschriften Sie das in der Verpackung enthaltene Röhrchen mit dem Namen der Person, von der die Probe stammt.



2. Nehmen Sie das Bürstchen aus der Verpackung. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Stäbchen nur am Stiel festhalten und das Bürstchen nicht berühren.

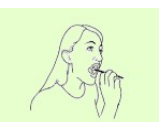

3. Spülen Sie den Mundraum bitte 2-3 Mal mit Wasser. Danach streichen Sie mit dem Bürstchen auf der Innenseite der Wange entlang. Während Sie auf und ab fahren, drehen Sie das Bürstchen etwas, machen Sie das für etwa 6 Sekunden.



4. Schieben Sie die Bürstchen bitte nach der Probenahme sofort wieder in das sterile Röhrchen (in der Verpackung enthalten) und knicken den Stiel des Abstrichsets an vorgesehener Stelle ab und entfernen dieses; anschließend Röhrchen bitte fest verschließen.

* Mit der Einsendung der Probe sichert der Einsender zu, dass der Patient mit der Probenentnahme und der Durchführung der Analyse einverstanden ist.